

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wózek toaletowy transportowy

Kod produktu: FS 692

Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

www.timago.com

1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

2. Wykonanie


Wózek toaletowy transportowy wykonany jest ze stalowej, malowanej proszkowo ramy. Posiada uchylne podłokietniki umożliwiające łatwe wsiadanie i zsiadanie osobom o znacznie obniżonej sprawności ruchowej. Wyposażony w miękkie siedzisko, tapicerowane nieprzemakalnym i łatwym w czyszczeniu materiałem, cztery obrotowe koła z hamulcami, uchylne podnóżki i pojemnik sanitarny. Dzięki swojej konstrukcji można nim najeżdżać na sedes.

Zestaw zawiera:

- ramę wózka
- siedzisko
- oparcie
- prawy podnóżek wraz z płytą podnóżka
- lewy podnóżek wraz z płytą podnóżka
- taśmę zabezpieczającą
- klucz do regulacji wysokości podnóżków
- pojemnik sanitarny z pokrywką

Elementy wózka:

- a. klipsy blokujące ramę
- b. siedzisko
- c. podłokietnik
- d. sztyft blokujący
- e. podnóżki
- f. bolec montowania podnóżka
- g. hamulec zaciskowy
- h. pojemnik sanitarny

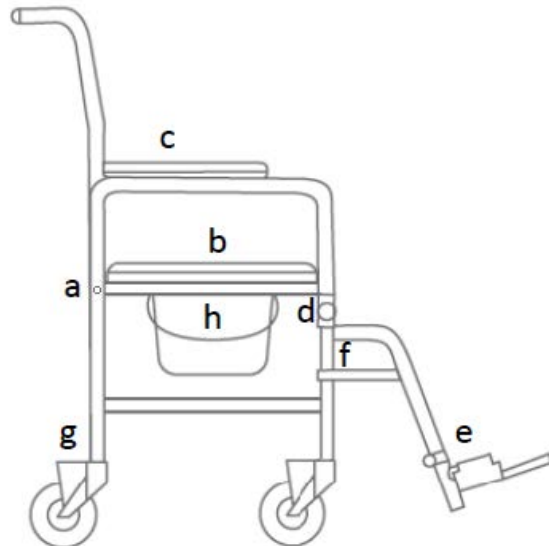

3. Zastosowanie

Wózek toaletowy transportowy jest sprzętem pomocniczym dla osób, mających problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz dla osób z dysfunkcjami i ograniczeniami ruchowymi. Przeznaczony do korzystania wewnątrz pomieszczeń. Może być obsługiwany tylko przy pomocy osoby towarzyszącej.

Wózek pełni funkcję transportowo-toaletową dzięki wyposażeniu w pojemnik sanitarny pod siedziskiem i cztery obrotowe koła. Ma na celu ułatwienie czynności fizjologicznych użytkownika. Szczególnie zalecany dla osób mających problemy z poruszaniem się wywołanych przez:

- paraliż
- nadwagę lub chorobliwą niedowagę
- zwyrodnienia lub deformację kończyn
- zwyrodnienia czy uszkodzenia stawów
- uszkodzenie kończyn lub ich amputacje
- choroby serca i naczyń, zaburzenia krążenia

4. Montaż i główne zalecenia użycia

Uwaga! Podczas montażu i regulacji należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności.

Uwaga! Nie należy siadać na wózek ani w żaden inny sposób z niego korzystać, przed wykonaniem wszystkich czynności dotyczących rozłożenia i montażu.

MONTAŻ

Krok 1. Należy wyciągnąć klipsy blokujące znajdujące się na ramie oparcia.

Krok 2. Należy wsunąć rurki oparcia w obie tylne części ramy głównej, a następnie zablokować oparcie klipsami blokującymi.

Krok 3. Należy zamontować podłokietnik w przedniej części ramy poprzez wciśnięcie sztyftów blokujących.

Krok 4. Należy zamontować prawy i lewy podnóżek w przedniej części ramy głównej osadzając je na dwóch bolcach i obracając do wewnątrz, do momentu zablokowania.

Krok 5. Należy zamontować i wyregulować taśmę zabezpieczającą na podnóżkach.

Krok 6. Pojemnik sanitarny bez pokrywki należy wsunąć z tyłu wózka w szyny znajdujące się pod siedziskiem. (Należy sprawdzić czy pojemnik został zamontowany poprawnie).

Wózek jest gotowy do użycia.

OBSŁUGA WÓZKA

- Przed każdym użyciem wózka należy sprawdzić sprawność hamulców, sprawność konstrukcyjną oraz stan kół. Należy również zwrócić uwagę na poprawność zamontowanych elementów i ich prawidłową regulację.
- Wózek nie posiada regulacji szerokości, przed rozpoczęciem użycia należy upewnić się, że szerokość wózka (45 cm) jest dostosowana do użytkownika.
- Wózek przeznaczony jest do pokonywania wyłącznie krótkich odcinków w pomieszczeniach. Wózek nie posiada amortyzatorów, dlatego jego długotrwałe używanie jest niewskazane.

Uwaga! Nie należy używać wózka w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub braków.

UCHYLANIE PODŁOKIETNIKÓW

- Należy wcisnąć sztyft blokujący, następnie wyjąć przednią część podłokietnika z zatrzasku i przesunąć go do dołu.
- Aby zamknąć podłokietnik, należy go przesunąć do góry i zamontować do momentu zablokowania sztyftu.

- **Nie należy** używać podłokietników jako pomocy do wstawania. W razie potrzeby należy wezwać osobę do pomocy.

HAMULCE

- Aby zablokować koła należy docisnąć stopą dźwignię lewego i prawego hamulca. Aby odblokować koło należy podciągnąć dźwignię stopą do góry.

PODNOŻKI

- W momencie wsiadania na wózek i zsiadania z wózka płyty podnóżków powinny być ustawione pionowo. **Nie należy wykorzystywać podnóżków do podpierania się w czasie czynności wsiadania i zsiadania, ze względu na ryzyko przechylenia się wózka i upadku.**

Uwaga! Nie należy stawać na podnóżki, ze względu na ryzyko ich uszkodzenia.

- Kiedy użytkownik znajduje się już na wózku, należy rozłożyć płyty podnóżków równoległe do podłoża, tak by stopy użytkownika podczas korzystania z wózka znajdowały się na podnóżkach.

WSIADANIE NA WÓZEK

- W trakcie wsiadania, zsiadania, zmiany pozycji użytkownika, postoju należy bezwzględnie zablokować hamulce.
- Wózek powinien być ustawiony jak najbliżej miejsca przesiadania, tak by stykał się z łóżkiem lub innym używanym siedziskiem, tylnym kołem i przednim elementem ramy. Jeżeli użytkownik nie jest w stanie przesiąść się samodzielnie, należy przenieść użytkownika na wózek.
- W wózku należy usiąść maksymalnie głęboko, po środku siedziska, aby zapobiec niestabilności produktu.

FUNKCJA TOALETOWA

- Pojemnik sanitarny wsuwa się z tyłu wózka w szyny blokujące pod siedziskiem. Przed każdorazowym użyciem funkcji toaletowej należy zdemontować siedzisko a następnie sprawdzić, czy pojemnik jest pewnie zamontowany pod siedziskiem.

- Wózek po zdjęciu siedziska i pojemnika sanitarnego umożliwia wygodny najazd na sedes.

Uwaga! W trakcie transportu zaleca się używanie pełnego siedziska.

Uwaga! Należy pamiętać o opróżnianiu pojemnika toaletowego po każdorazowym użyciu.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA

Uwaga! Nie należy przekraczać maksymalnego obciążenia wózka!

Uwaga! Wózek przeznaczony jest do użycia wewnątrz pomieszczeń **TYLKO** po równych powierzchniach. Używanie wózka na podłożu nie dającym pewnego oparcia dla użytkownika tj. na mokrych, tłustych, silnie zabrudzonych powierzchniach, jest niedopuszczalne.

Uwaga! Wózek nie jest przeznaczony do pokonywania przeszkód architektonicznych (stopni, podjazdów, progów).

Uwaga! Nie należy przejeżdżać przez wnęki, np. futryny drzwi bez upewnienia się czy ich szerokość jest większa od zewnętrznej szerokości wózka.

Uwaga! Wózka nie należy wykorzystywać do transportu ciężkich przedmiotów.

Uwaga! Nie należy wspinać się na wózek, a także stawać na siedzisku i innych jego częściach.

Uwaga! Nie należy! przytwierdzać lub zawieszać przedmiotów na ramie lub podłokietniku wózka, ponieważ wózek może się przewrócić.

Uwaga! Niedopuszczalne jest przenoszenie wózka wraz z użytkownikiem.

Uwaga! W trakcie wsiadania, zsiadania, zmiany pozycji użytkownika, postoju należy bezwzględnie zablokować hamulce.

Uwaga! Nigdy nie należy pozostawiać użytkownika w wózku (nawet przy zaciągniętych hamulcach) na zjazdach, rampach, półpiętrach itp.!

5. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	55 cm
Szerokość wewnętrzna	45 cm
Głębokość całkowita	87 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53 cm
Wysokość całkowita	95 cm
Wymiary siedziska	44 x 44 cm
Waga	10,6 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg
Wymiary po złożeniu	55 cm
Kolor ramy	czerwony

6. Uwagi i zalecenia

Uwaga! Należy systematycznie przeglądać stan wózka i niezwłocznie zgłaszać Sprzedawcy wszelkie uszkodzenia budzące wątpliwości co do bezpieczeństwa korzystania z przyrządu.

Uwaga! Należy przechowywać wózek w suchych pomieszczeniach w temp. poniżej 40°C oraz nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody, pyłu, piasku, itp. Wózek w czasie przechowywania musi być odpowiednio zabezpieczony (okryty) oraz wolny od wszelkiego rodzaju obciążeń zewnętrznych. Należy pamiętać, że temperatura powierzchniowa tapicerki i elementów ramy może wzrosnąć po wystawieniu na działanie słońca lub innego źródła ciepła, co może grozić oparzeniem.

Uwaga! Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych pochodzących od Wytwórcy. W tym celu skontaktuj się ze Sprzedawcą.

Uwaga! Nie należy dokonywać samodzielnych napraw czy przeróbek konstrukcyjnych.

UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe poruszanie się na wózku, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

7. Czyszczenie i konserwacja

Przeglądy

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego wózka:

- Przed każdorazowym użyciem: Sprawdzić stan elementów mechanicznych, poprawność zamontowania elementów demontowalnych, właściwą pracę hamulców oraz właściwe rozłożenie wózka.
- Co 4 tygodnie: Sprawdzić stan elementów mechanicznych w tym właściwe smarowanie, właściwą regulację hamulca oraz stan siedziska.
- Co 6 miesięcy: Zaleca się dokonać przeglądu w punkcie serwisowym wskazanym przez Wytwórcę (zgodnie z obowiązującym cennikiem serwisu).

Czyszczenie i konserwacja

Należy systematycznie dokonywać konserwacji elementów wózka:

- Tapicerka i poduszka może być czyszczona wodą zimną lub ciepłą przy pomocy zwilżonej (nie mokrej) szmatki oraz bez użycia detergentów. Trudniejsze plamy należy czyścić przy użyciu gąbki. Przy konserwacji tapicerki należy zwrócić uwagę aby jej nadmiernie nie namaczać. Należy suszyć z dala od źródeł ciepła.
- Elementy z tworzywa sztucznego należy czyścić zwilżoną szmatką, ewentualnie z wykorzystaniem środków do czyszczenia tworzyw sztucznych. Należy przy tym postępować zgodnie z instrukcją Producenta oraz zasadami bezpieczeństwa przy wykorzystaniu detergentów.
- Po każdorazowym użyciu należy opróżnić i zdezynfekować pojemnik oraz deskę siedziska. Należy wykorzystywać środki do czyszczenia toalet zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Uwaga! Jeśli produkt jest używany przez wiele osób (np. dom opieki), należy stosować środki dezynfekcyjne.

- Przed przystąpieniem do dezynfekcji należy oczyścić tapicerkę i uchwyty.
- Dezynfekcję należy przeprowadzić przy pomocy środków chemicznych odpowiednich do powłok i powierzchni naszego produktu. Stosowanie tych środków

dezynfekujących dopuszczone powinno być przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.










8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Wytwórca
	Numer partii		Data produkcji
	Numer seryjny		Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

10. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdują Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne
- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwoodleżynowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające

- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na **www.timago.com**



Wytwórca:

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie I, data aktualizacji 29.07.2016